

Produktbeschreibung von Vlies SMS für chirurgische Kleidung nach EN13795-1: 2019

Unser SSMMS ist von besserer Qualität als normales SMS. SSMMS wäre eine bessere Gleichmäßigkeit, eine bessere Zugfestigkeit und eine bessere Isolationsfähigkeit als SMS.

Aber tatsächlich können Sie und die meisten Benutzer SMS und SSMMS nicht anhand Ihrer Augen unterscheiden, weil sie gleich aussehen.

Normalerweise werden unsere 45 g / m² SSMMS am häufigsten zur Herstellung von Operationskitteln und -vorhängen verwendet.

Unsere 45 g / m² erfüllen die US-Norm AAMI Level 3 und die europäische Norm EN 13795-1: 2019 Chirurgische Kleidung und Vorhänge - Anforderungen und Prüfmethoden - Teil 1: Chirurgische Vorhänge und Roben

Die Berichte von AAMI und EN 13795 wären verfügbar.

Jetzt bieten wir diese SSMMS-Struktur für die Türkei, die USA, Italien, Peru, Aserbaidschan, Kolumbien, Russland und Großbritannien an.

Produkt : Vlies SMS Für chirurgische Kleidung nach EN13795-1: 2019

Modell Nr. : GT-hy sms 45b

Komposition : pp

Technik: spunbond + Spunbond + Meltblown + Meltblown + gesponnen

Durchschnittliches Stoffgewicht: 45 GSM

Größe : 160 cm

Länge: 1000 m

Durchmesser jeder Rolle: 55 cm

Gewicht : ca. 73 kg

Lautstärke: ca. 0,48 m³

Farben : Blau

Standard: US-Norm AAMI Level 3 und europäische Norm EN 13795-1: 2019 Chirurgische Kleidung und Vorhänge - Anforderungen und Prüfmethoden - Teil 1: Chirurgische Vorhänge und Roben

MOQ: 1000 KG (kundenspezifisch)

Paket: Verpackt in Rollen, mit 2 "oder 3" ID-Kern innen, Polybeuteln außen

Stichprobe : Kostenlose Probe mit Fracht sammeln

Charakteristisch : antibakteriell, anti-pull, antistatisch, reißfest, atmungsaktiv, umweltfreundlich, wasserdicht

Anwendungen: OP-Kittel, Theater-Peelings, OP-Vorhänge

our SSMMS products can reach the following standards of the surgical gown
我们的SSMMS产品能达到的以下手术衣标准

	Standard Test Items 标准测试项目	AAMI PB70 美标	EU 13795 欧标	YY/T 0506 国标
Protection Performance 防护性能	Hydrostatic Pressure Test 静水压测试	√	√	√
	Liquid Permeability 液体渗透性	√	√	√
	Blood Permeability 血液渗透性	√#	O	O
	Microbial Permeability 微生物渗透性	√#	√	√
Material Strength 材料强度	Tensile Strength 拉力强度	O	√	√
	Blasting Strength 爆破强度	O	√	√
The Comfort Level 舒适度	Breathability 透气性	O	O	O
	Moisture Permeability 透湿性	O		O
Microbial Transmission Performance 微生物传递性能	Deflocculation 脱絮	O	√	√
	Particle Cleanliness 颗粒洁净度	O	√	√
	Microbial Cleanliness 微生物洁净度	O	√	√

√: Test items included in the standard;

√: 标准中包含该测试项目;


#: Only applicable to Level 4 protection products;


#: 仅适用于四级防护产品;

O: Test items are not included in the standard

O: 标准中不包含改测试项目


American Association for the Advancement of Medical Devices (AAMI) divides the liquid barrier performance into four levels for the medical textile products, such as surgical gown, drape and isolation clothing, etc.

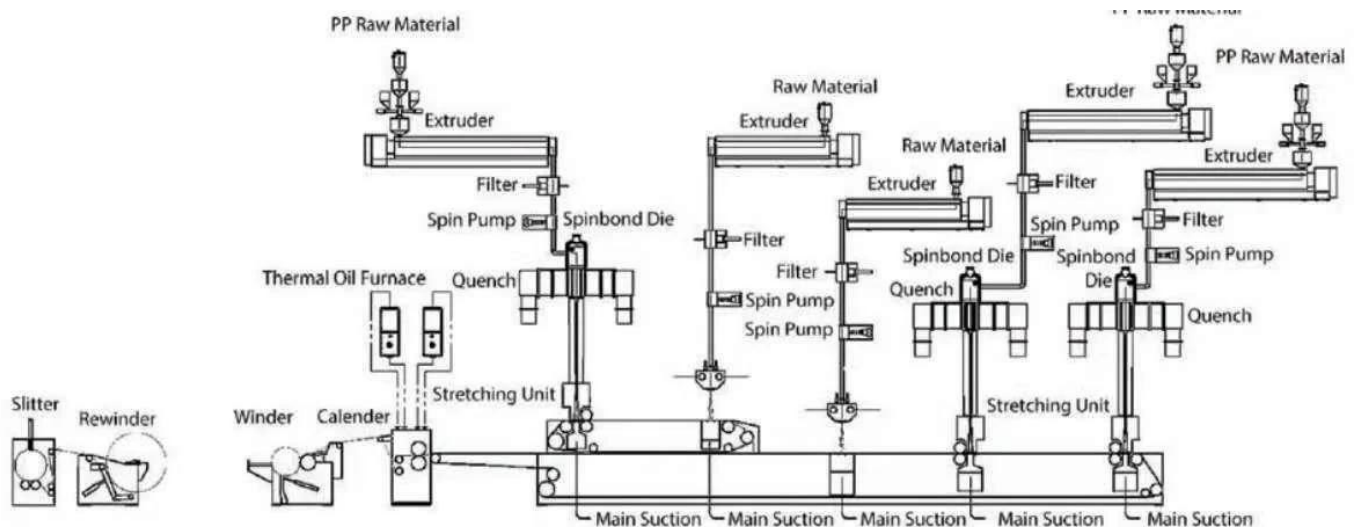

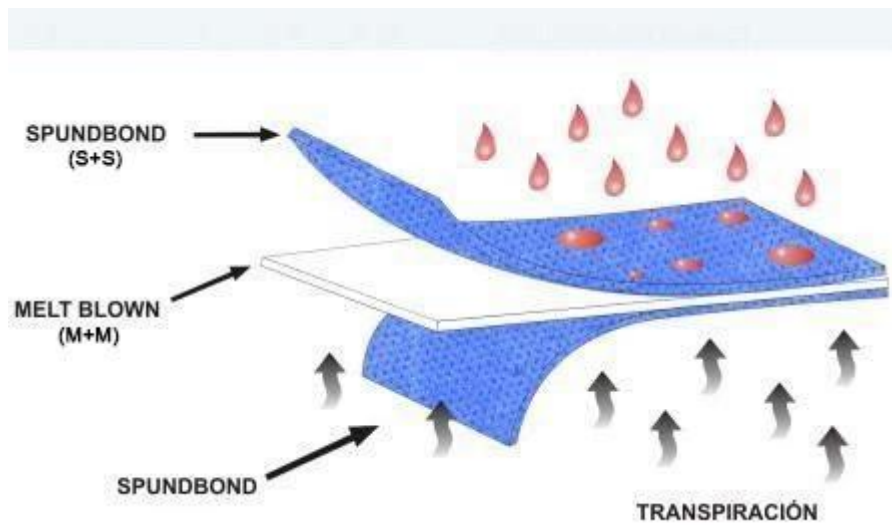


Produktausstellung von Vlies SMS für EN13795-1: 2019 Chirurgische Kleidung

[Hydrophober SMS-Großhandel](#)

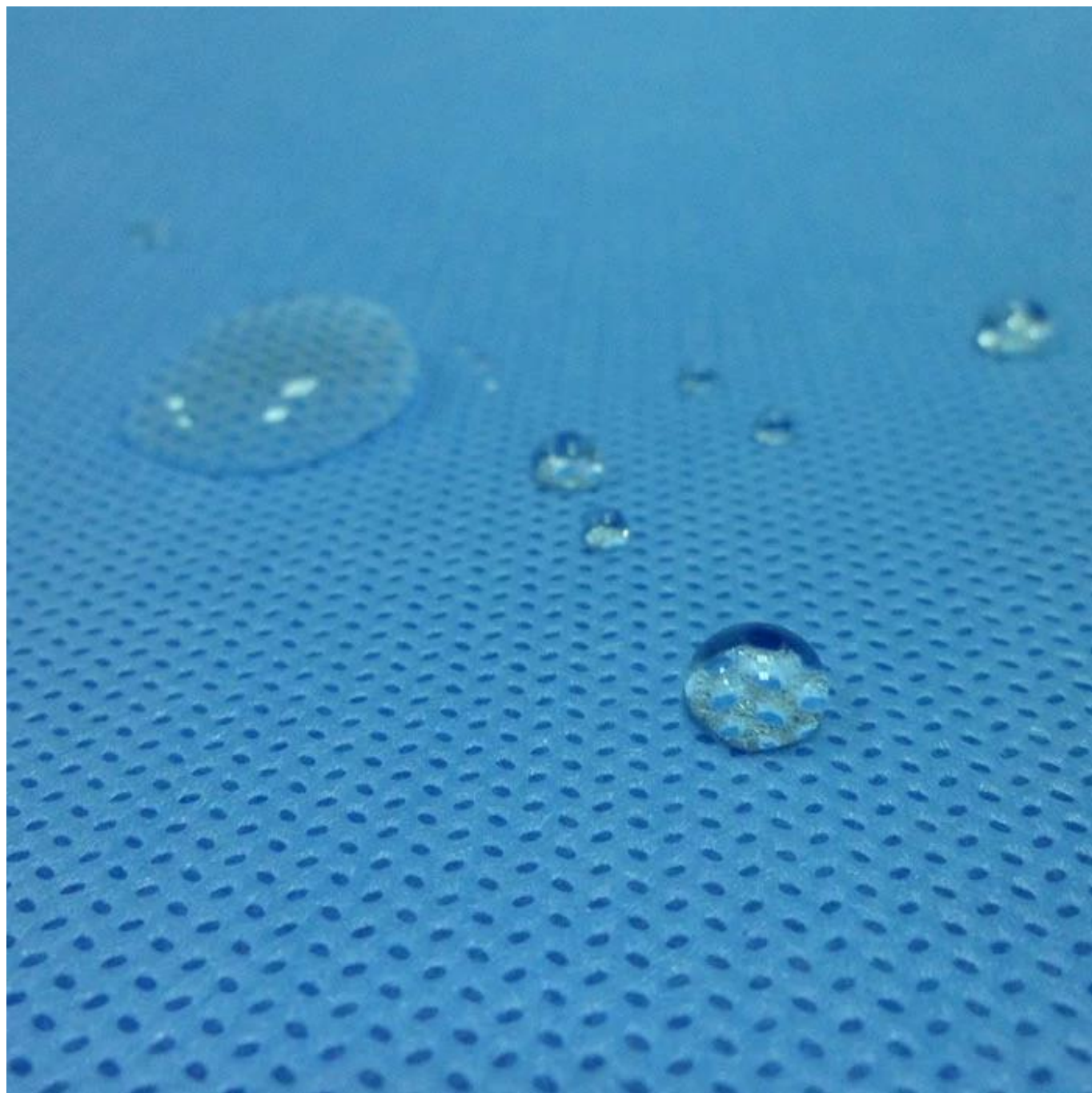



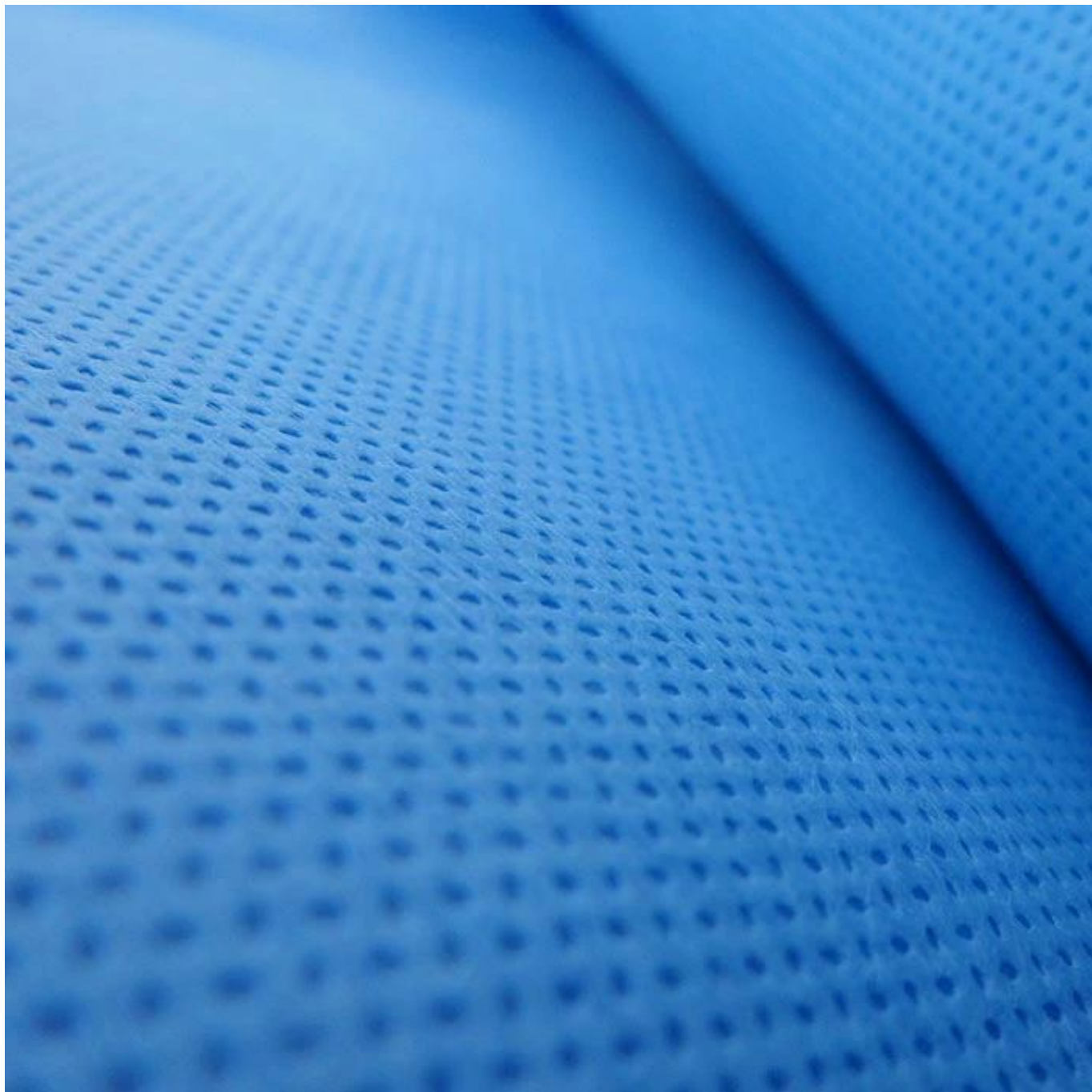

Anwendungen von SMS-Vlies für chirurgische Kleidung nach EN13795-1: 2019

[SMS-Stoffe im Verkauf](#)



Disposable Underwear



Nonwoven Shoes Cover



Protective Clothing



Nonwoven Pillow bag



Nonwoven Bed Sheet



Face Mask



Medical Wrapping



Disposable Bouffant Cap



Nonwoven Sleeve

Produktverpackung und Versand von SMS-Vlies für chirurgische Kleidung nach EN13795-1: 2019



Production Line



Product
Packaging



Loading

Zertifikat für SSMMMS-Vliesstoff



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 1 of 4	

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缙纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) : No.8, Hezhong RD, Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247
CHINA (佛山市南海区大沥镇盐步河中路8号)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : SMS non-woven fabric 45g (SMS 无纺布 45 克)
Style No.(款号) : KHSSMMS-45G
Sample Quantity(样品数量) : 8 m (8 米)
Color and Description(颜色及描述) : Medical blue: 45g (医用蓝色: 45 克)
Size specification(号型规格) : KHSSMMS-45G

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-06-02
- Report date (报告日期) : 2020-06-05
- The original sample is stuck on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
GB 19082-2009 Technical requirements for single-use protective clothing for medical use
医用一次性防护服技术要求
GB/T 38462-2020 Textiles-Nonwoven fabrics for isolation gowns Level II
纺织品 隔离衣用非织造布 II 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated. All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases. (除非特别说明, 测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行, 有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account. (除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by
(批准)

张志强



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 2 of 4	

--- Test Result (测试结果) ---

Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
✓ GB 19082-2009		

1. Tensile Strength(断裂强力) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <N>

Lengthwise(纵向)	104	≥ 45	Pass(合格)
Crosswise(横向)	51		

2. Breaking Elongation(断裂伸长率) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <%>

Lengthwise(纵向)	94	≥ 15	Pass(合格)
Crosswise(横向)	78		

3. Filtration Efficiency(过滤效率) GB 19082-2009 Section 5.7(条款 5.7)

Air flow: 15L/min, Aerosol: NaCl(气体流量: 15L/min, 气溶胶颗粒: NaCl)

Unit(单位): <%>

Minimum value(最小值)	72.6	≥ 70	Pass(合格)
--------------------	------	------	----------

4. Hydrostatic Pressure(抗渗水性) GB/T 4744-1997

Distilled water temperature is 20°C. The rate of increase of water pressure is 6.0kPa/min.

Testing surface: face(测试水温度 20°C, 水压上升速率 6.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): <kPa>

Mean value(平均值)	6.93	≥ 1.67	Pass(合格)
-----------------	------	--------	----------

5. Resistance to Penetration by Synthetic Blood(抗合成血液穿透性) GB 19082-2009 Appendix A(附录 A)

Synthetic blood surface tension: 0.040N/m(合成血液表面张力: 0.040N/m)

Unit(单位): <grade(级)>

The sample cannot be pressurized due to air leakage, so it is not suitable for testing

(样品漏气无法加压, 不适合测试)

广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测 报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 3 of 4	
Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

6. Water Vapor Permeability(透湿量) GB/T 12704-1991 Method A(方法 A)

Desiccant method at 38℃, Relative humidity at 90%, wind speed at 0.3m/s, Testing surface: back.(吸湿法, 测试仓温度: 38℃, 湿度: 90%, 风速: 0.3m/s, 测试面: 反面)

Unit(单位): $<g/(m^2 \cdot d)>$

Result(测试结果) 7.09×10^3 ≥ 2500 Pass(合格)

✓ GB/T 38462-2020

1. Hydrostatic Pressure(静水压) GB/T 24218.16-2017

Distilled water temperature is 21℃. The rate of increase of water pressure is 1.0kPa/min.

Testing surface: face (测试水温度 21℃, 水压上升速率 1.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): $<kPa>$

Minimum value (最小值) 6.5 ≥ 1.8 Pass(合格)

Remark (备注): The hydrostatic pressure item is unauthorized for CNAS.
(CNAS 未授权静水压项目。)

UNITED
TESTING SERVICES



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 4 of 4



Original (送检样品原样)



===== End of Report (检测报告结束) =====



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼1, 3&4F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

Unser Unternehmen

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD., das sich in der Stadt Foshan befindet. Seit 2005 beschäftigen wir uns mit der Herstellung und dem Verkauf von Vliesstoffen und Produkten, die mit Vliesstoffen in

Verbindung stehen. Bis jetzt verfügen wir über ein professionelles Elite-Verkaufsteam, mehrere fortschrittliche Vliesproduktionslinien mit einer Breite von 1,6 Mio., 1,9 Mio., 2,1 Mio., 2,4 M, 2,5 M, 3,2 M, 3,7 M, 4,8 M usw. Unsere Produkte werden sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Überseemarkt gut verkauft und sind in den Bereichen Landwirtschaft und Gartenbau, Medizin und Hygiene, Körperpflege und Schönheit, Industrieanwendung, Verpackung weit verbreitet und Verpackung, Fundament und Gebäude, Hotel und Restaurant, Arbeitsschutz und Haushalt, Dekoration usw. Heißverkaufsprodukte sind pp (Polypropylen) Vliesstoff, Haustier (Polyester) Vliesstoff, sms Vlies, elastischer Vliesstoff, Blumenverpackungsmaterial, Einwegunterwäsche, Einwegbettlaken, Unkrautbekämpfungsmittel, Einweg-Tischdecke, Obstschutzbeutel.



FAQ zu Vlies SMS für chirurgische Kleidung nach EN13795-1: 2019

Frage	Antworten
Q1: Haben Sie es auf Lager?	A1: Ja, das haben wir.
F2: Was ist Ihr MOQ?	A2: Angepasst: 1 Tonne
F3: Wie kann ich die Probe bekommen?	A3: Wenn Sie zum Testen ein Muster benötigen, können wir es gemäß Ihrer Anfrage herstellen. Wir müssen jedoch Mustergebühren erheben. Wenn es sich um unser reguläres Produkt handelt, zahlen Sie nur die Frachtkosten und die Probe ist kostenlos.
F4: Was ist Ihr Paketdetail?	A4: einzeln verpackt für jeden PC oder Kundenwunsch
F5: Was soll ich tun, wenn ich auf Ihrer Website nicht finde, wonach ich suche?	A5: Bitte zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren und detaillierte Informationen für das gesuchte Produkt zu senden. Wir werden prüfen, ob es verfügbar ist.
F6: Was ist mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion?	A6: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Saison ab, in der Sie bestellen. Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit ca. 2-4 Wochen. Wir empfehlen Ihnen daher, die Anfrage so früh wie möglich zu starten.
F7: Ist es in Ordnung, den eigenen Markennamen des Kunden zu erstellen?	A7: Sicher. Wir heißen die OEM-Kunden herzlich willkommen. Wir können das Paket, das Design usw. besprechen.

F8: Wann kann ich den Preis bekommen?	A8: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben. Wenn Sie dringend den Preis erhalten möchten, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihnen den Preis so schnell wie möglich mitteilen können.
---------------------------------------	---