

N95

材料	PP		
重量	25 GSM	40 GSM	
颜色	白色		
规格	符合EN14683 Type I / II / R / ASTM F2100 Level 1 / 2 / 3 / FFP1 / FFP2 / KN95 / KN99 / KF94 / N95 / N100		
尺寸	17.5 / 26 cm	25/26 cm	
过滤效率	BFE99%	BFE 99.5% @ 100%	
流量	32L / min PFE ≥ NaCl 98%+	85L / min PFE ≥ NaCl 95%+	85L / min PFE ≥ NaCl 99%+
呼吸阻力	1000/2500 Pa	1300 Pa	
长度	43 / 73cm	55cm	
宽度	3/2 英寸	2 英寸	
重量	15-16kg / 14-15 kg / 32-35 kg	26-28kg / 27-29 kg	
包装尺寸	49.5x49.5x54.5 / 73 * 73 * 52.5 cm	49.5x49.5x54.5 cm	

U.S.A.:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS
 美国：ASTM F2100-19 医疗口罩中使用的材料性能标准规范


EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS
 欧洲：EN 14683：2019 医疗口罩的要求和测试方法

		ASTM F2100-19			EN 14683:2019 Barrier Levels		
		level 1	level 2	level 3	Type I	Type II	Type IIR
Barrier Testing	BFE% ASTM F2101, EN 14683	≥ 95	≥ 98		≥ 95	≥ 98	
	PFE% ASTM F2299	≥ 95	≥ 98		Not required		
	Synthetic Blood ASTM F1862, ISO22609	Pass at 80 mmHg	Pass at 120 mmHg	Pass at 160 mmHg	Not required		Pass at ≥ 16.0 kPa(120 mmHg)
Physical Testing	Differential Pressure EN 14683	<5.0mmH ₂ O/cm ²	< 6.0 mmH ₂ O/cm ²		<40 Pa/cm ²		<60 Pa/cm ²
Safety Testing	Flammability 16 CFR Part 1610	Class 1(≥3.5 seconds)			See European Medical Directive (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)		
	Microbial Cleanliness ISO 11737-1	Not required			≤30 cfu/g		
	Biocompatibility ISO 10993	510 K Guidance recommends testing to ISO 10993			Complete an evaluation according to ISO 10993		

类型	规格	重量 g / m ³	流量 Pa	过滤效率 %	呼吸阻力 Pa	流量 L / min	材料	规格
P 系列	FFP1	40	<40	> 80		95L	DOP	FFP1 系列
	FFP2 / KF94	50	<160	> 94	呼吸阻力 Pa	95L	DOP	FFP2 / KF94 系列
	FFP3	80	<190	> 97		95L	DOP	FFP3 系列
KN 系列	KN90	40	<80	> 90		85L	NaCl	KN90
	KN95 / N95	50	<100	> 95	呼吸阻力 Pa		NaCl	KN95 / N95
	KN100	80	<175	> 99.97			NaCl	KN99 / N100

□□□□□ N95□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

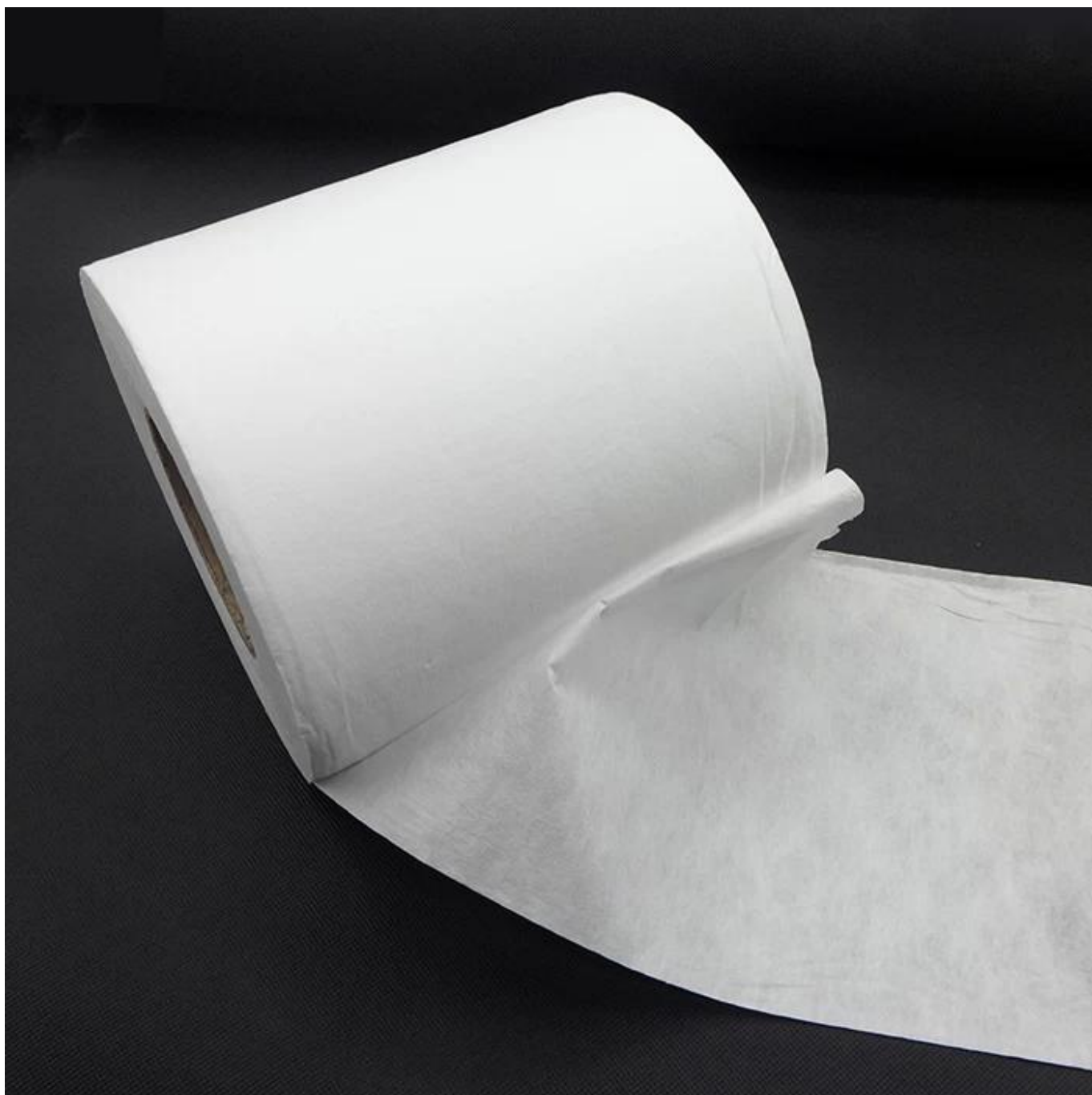



□□□□□□□□

N95□□□□□□□□□□□□□□□□



Production Line



Product Packaging



Loading



FOSHANGUIDE TEXTILE CO.,LTD
 2005
 1.6M 1.9M 2.1M 2.4M 2.5M 3.2M 3.7M 4.8M
 pp
 sms

XX
XX



XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX



检测报告(Testing Report)

防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn
防伪码(Security code): 7815080747



报告编号(Report No): ZFLJ2642756

Page 1 of 3

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缙纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) : Yonghao Industrial Park, Yongqing RD., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist.,
Foshan, G.D.528247, CHINA(佛山市南海区大沥镇盐步永青路永好产业园)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : meltblown non woven fabric 25gsm(熔喷无纺布 25 克)
Style No.(款号) : SSKX-25
Specification(规格) : 260mm
Sample Quantity(样品数量) : 1roll (1 卷)
Colour(颜色) : white(白色)
Model(型号) : SSKX

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-08-15
- Report date (报告日期) : 2020-08-21
- The original sample is stuck on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks Level 2
医用口罩用材料性能的技术规范 2 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明, 测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行, 有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of

CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by
(批准)

张志荣

(Except for microbiological project 微生物项目除外)

罗拉越

(Microbiological project 微生物项目)





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1842



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)

防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn
防伪码(Security code): 7815080747



报告编号(Report No): ZFLJ2642756

Page 2 of 3

--- Test Result (测试结果) ---

Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 微米的颗粒过滤效率)		
<u>ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)</u>		
Aerosol: PSL, Test area: 100cm ² , Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3µm, Basis Weight: 25.0g/m ² (气溶胶类型: PSL, 测试面积: 100cm ² , 测试流量: 32L/min, 采样时间: 1min, 厚度: 2.3µm, 单位面积质量: 25.0g/m ²)		
Unit(单位): <%>		
sample 1#(样品 1)	98.8 ≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.0	
sample 3#(样品 3)	98.6	
sample 4#(样品 4)	98.1	
sample 5#(样品 5)	98.1	
Minimum(最小值)	98.1	
2. Bacterial Filtration Efficiency(细菌过滤效率) <u>ASTM F 2101-19</u>		
Flow rate: 28.3L/min, Test area: 77cm ² , Test bacteria culture: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Particle Diameter: 3.0µm, Inside of the test mask was facing towards the challenge aerosol, The average plate count results of the positive controls: 2.6×10 ³ CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(气体流速: 28.3L/min, 测试面积: 77cm ² , 试验菌种: 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538, 平均颗粒直径: 3.0µm, 口罩内侧面朝向气溶胶室, 阳性质控值: 2.6×10 ³ CFU, 阴性质控值: <1CFU)		
Unit(单位): <%>		
sample 1#(样品 1)	99.9 ≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.9	
sample 3#(样品 3)	99.9	
sample 4#(样品 4)	99.9	
sample 5#(样品 5)	99.9	





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1842



佛山中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)

防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn
防伪码(Security code): 7815080747



报告编号(Report No): ZFLJ2642756

Page 3 of 3

Original (送检样品原样)



===== End of Report (检测报告结束) =====



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼 1, 3&4/F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

N95 口罩常見問題解答 (FAQ)

問題	答案
Q1 什麼是 N95 口罩？	A1 符合 NIOSH 標準的 N95 呼吸器
Q2 什麼是 MOQ？	A2 最低訂購量 1 萬個
Q3 為什麼我的 N95 口罩在呼吸時會感到困難？	A3 呼吸困難可能是由於口罩的密封性不佳，或是您的呼吸系統本身就有問題。請檢查您的呼吸系統，並確保您的 N95 口罩正確佩戴。
Q4 為什麼我的 N95 口罩在呼吸時會感到悶熱？	A4 PC 口罩的透氣性較差，因此會感到悶熱。
Q5 為什麼我的 N95 口罩在呼吸時會感到乾燥？	A5 呼吸器本身並不會產生濕氣，因此會感到乾燥。請多喝水，並確保您的呼吸系統處於良好狀態。
Q6 為什麼我的 N95 口罩在呼吸時會感到不適？	A6 呼吸器本身並不會產生不適感，因此會感到不適。請檢查您的呼吸系統，並確保您的 N95 口罩正確佩戴。24 小時佩戴 N95 口罩可能會導致不適。
Q7 為什麼我的 N95 口罩在呼吸時會感到不舒服？	A7 呼吸器本身並不會產生不舒服感，因此會感到不舒服。請檢查您的呼吸系統，並確保您的 N95 口罩正確佩戴。OEM 呼吸器可能會導致不舒服。
Q8 為什麼我的 N95 口罩在呼吸時會感到不適？	A8 呼吸器本身並不會產生不適感，因此會感到不適。請檢查您的呼吸系統，並確保您的 N95 口罩正確佩戴。24 小時佩戴 N95 口罩可能會導致不適。