

## Descrição do produto de batas cirúrgicas estéreis personalizadas de fábrica de tecido médico SMMMS tecido não tecido hospitalar de matéria-prima

O nosso é o SSMMS, que é de melhor qualidade do que o SMS normal. SSMMS seria melhor uniformidade, melhor resistência à tração, melhor capacidade de isolamento do que SMS. Mas, na verdade, para você e para a maioria dos usuários, não é possível distinguir SMS e SSMMS com seus olhos. porque eles parecem iguais.

Normalmente, nossos SSMMS de 45gsm são os mais usados para fazer batas e campos cirúrgicos.

Nosso 45gsm pode passar pelo padrão AAMI nível 3 dos EUA e pelo padrão europeu EN 13795-1:2019 Roupas e campos cirúrgicos - Requisitos e métodos de teste - Parte 1: Campos cirúrgicos e aventais os relatórios de AAMI e EN 13795 estariam disponíveis.

agora estamos oferecendo este tecido SSMMS para a Turquia, EUA, Itália, Peru, Azerjajão, Colômbia, Rússia, Reino Unido.

**Produtos :** SMS tecido não tecido médico

**Nº do modelo:** GT-hysms45b

**Composição:** pp

**Técnicas:** spunbond spunbond derreter soprado derreter soprado spunbond

**Peso médio do tecido:** 45 GSM

**Tamanho :** 160 cm

**Comprimento :** 1000 m

**Diâmetro de cada rolo:** 55 cm

**Peso :** aproximadamente 73kg

**Volume:** aproximadamente 0,48 m<sup>3</sup>

**Cores:** Azul

**Padrão :** Padrão AAMI nível 3 dos EUA e padrão europeu EN 13795-1:2019 Roupas e campos cirúrgicos - Requisitos e métodos de teste - Parte 1: Campos e aventais cirúrgicos

**MOQ:** 1000 KG (personalizado)

**Pacote :** Embalado em rolos, com núcleo ID de 2 "ou 3" dentro, sacos poli fora

**Amostra :** Amostra grátis com frete a cobrar

**Característica:** antibacteriano, antiderrapante, antiestático, resistente a rasgos, respirável, ecológico, à prova d'água

**Formulários :** batas cirúrgicas, jalecos cirúrgicos, campos cirúrgicos

**our SSMMS products can reach the following standards of the surgical gown**  
**我们的SSMMS产品能达到的以下手术衣标准**

	Standard Test Items 标准测试项目	AAMI PB70 美标	EU 13795 欧标	YY/T 0506 国标
Protection Performance 防护性能	Hydrostatic Pressure Test 静水压测试	√	√	√
	Liquid Permeability 液体渗透性	√	√	√
	Blood Permeability 血液渗透性	√#	O	O
	Microbial Permeability 微生物渗透性	√#	√	√
Material Strength 材料强度	Tensile Strength 拉力强度	O	√	√
	Blasting Strength 爆破强度	O	√	√
The Comfort Level 舒适度	Breathability 透气性	O	O	O
	Moisture Permeability 透湿性	O		O
Microbial Transmission Performance 微生物传递性能	Deflocculation 脱絮	O	√	√
	Particle Cleanliness 颗粒洁净度	O	√	√
	Microbial Cleanliness 微生物洁净度	O	√	√

√: Test items included in the standard;

√: 标准中包含该测试项目;

#: Only applicable to Level 4 protection products;

#: 仅适用于四级防护产品;

O: Test items are not included in the standard

O: 标准中不包含改测试项目

美国医疗器械促进协会 (AAMI) 对于医用纺织产品如：手术衣、洞巾、隔离衣等液态阻隔性能等级分为四级  
 American Association for the Advancement of Medical Devices (AAMI) divides the liquid barrier performance into four levels for the medical textile products, such as surgical gown, drape and isolation clothing, etc.



第四级 (Level 4)  
 必须通过血液与病毒渗透两项试验, 抗静水压试验必须大于140cmH<sub>2</sub>O;  
 Must pass the test of Blood and virus penetration, hydrostatic pressure test must be more than 140cmH<sub>2</sub>O;

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
ASTM F1671: 2003*	PASS	4%
ASTM F1670: 2003*	PASS	4%

高防护



第三级 (Level 3)  
 疏水性渗透量必须小于1.0g, 抗静水压试验必须大于50cmH<sub>2</sub>O;  
 The hydrophobic permeability must be less than 1.0g, hydrostatic pressure test must be more than 50 cmH<sub>2</sub>O

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<1.0g	4%
AATCC 127:1998	>50cm	4%

加强防护



第二级 (Level 2)  
 疏水性渗透量必须小于1.0g, 抗静水压试验必须大于20cmH<sub>2</sub>O;  
 The hydrophobic permeability must be less than 1.0g, hydrostatic pressure test must be more than 20cmH<sub>2</sub>O

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<1.0g	4%
AATCC 127:1998	>20cm	4%


标准防护




第一级 (Level 1)  
 医用纺织品必须经过疏水性 (抗冲击渗透) 试验, 渗透量必须小于4.5g  
 Medical textiles must pass the hydrophobicity (impact penetration resistance) test, and the penetration amount must be less than 4.5g

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<4.5g	4%


标准防护

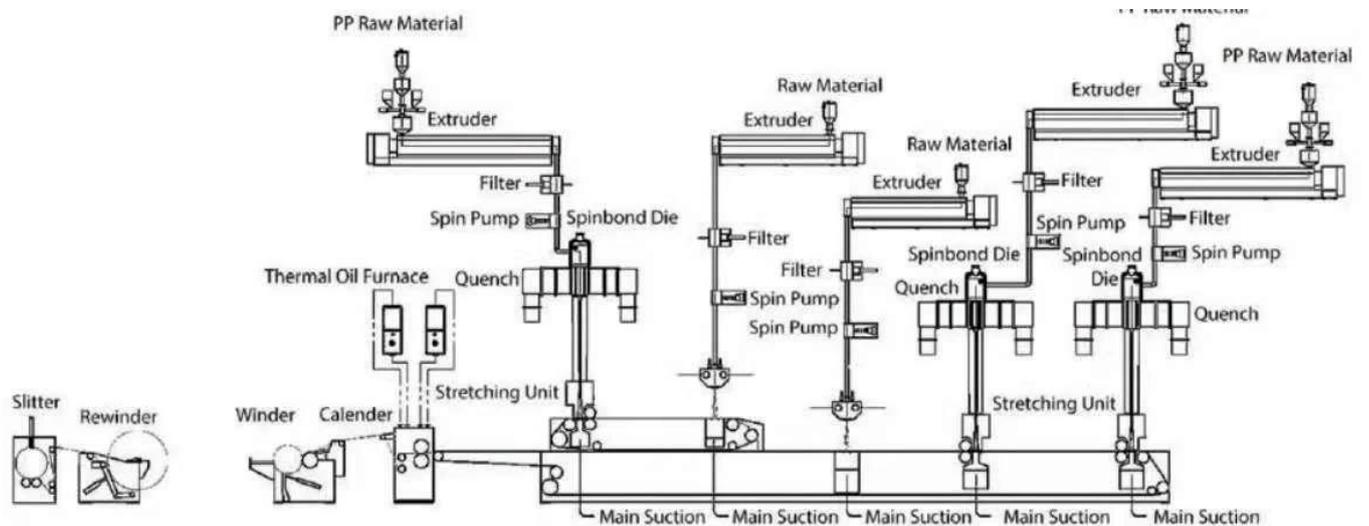


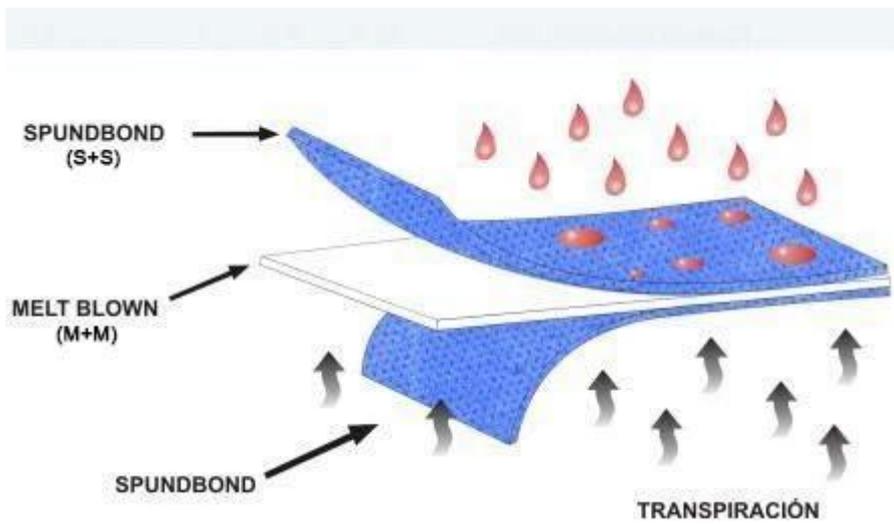


Show de produtos de fábrica de tecidos SMMMS médicos, batas cirúrgicas estéreis personalizadas, tecido não tecido hospitalar de matéria-prima

[Fornecedor de tecido não tecido smms da China](#)

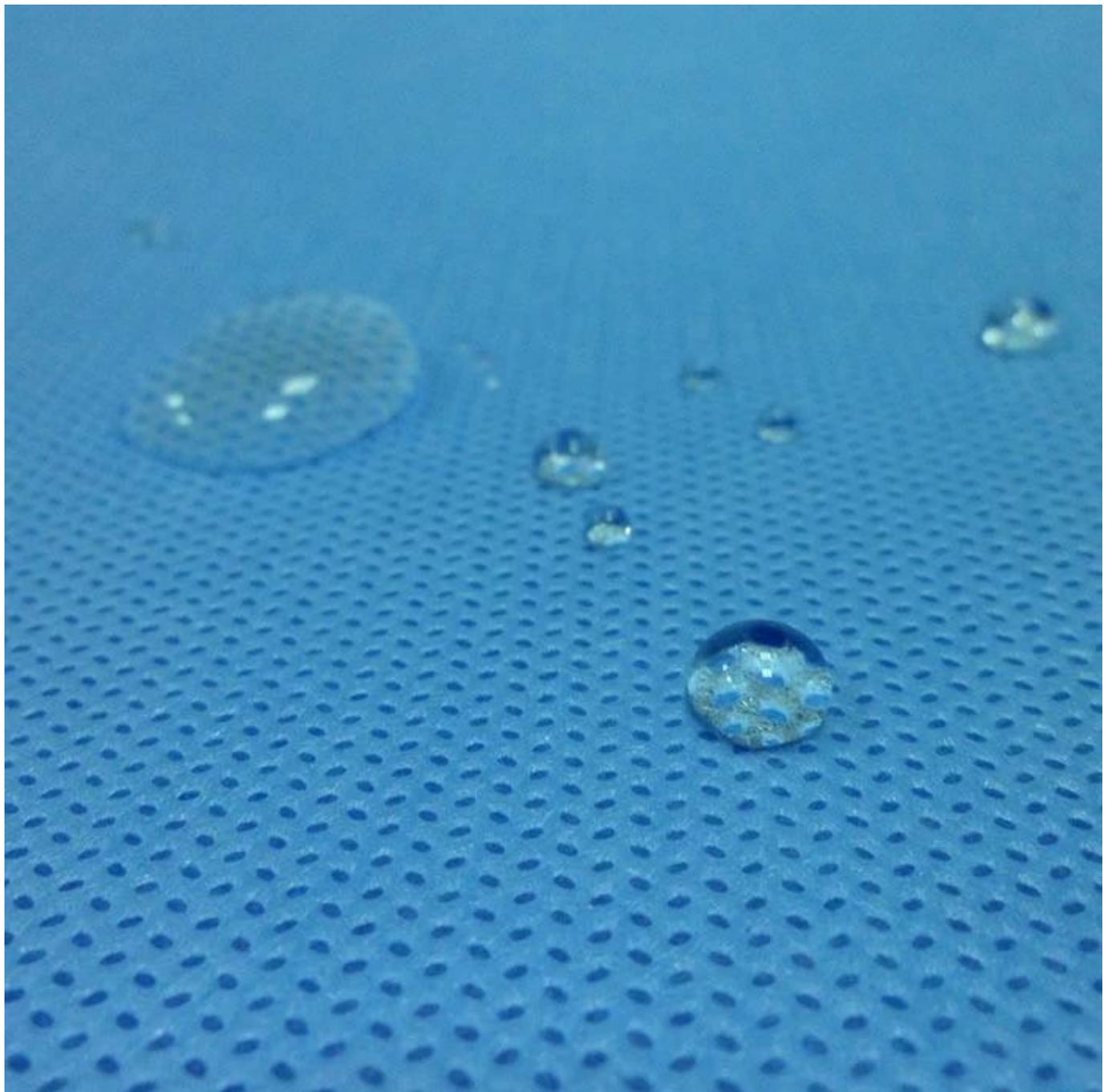

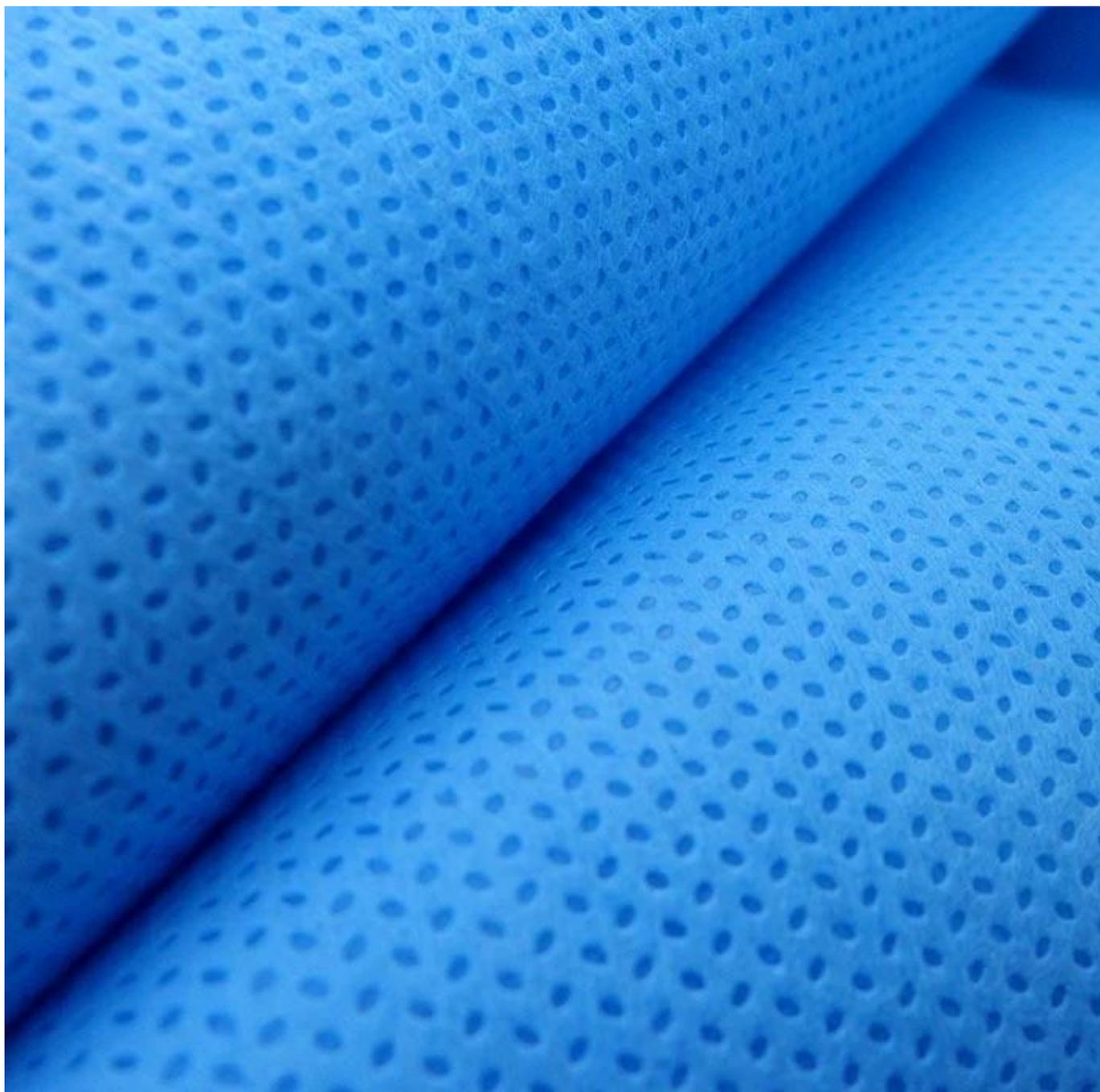

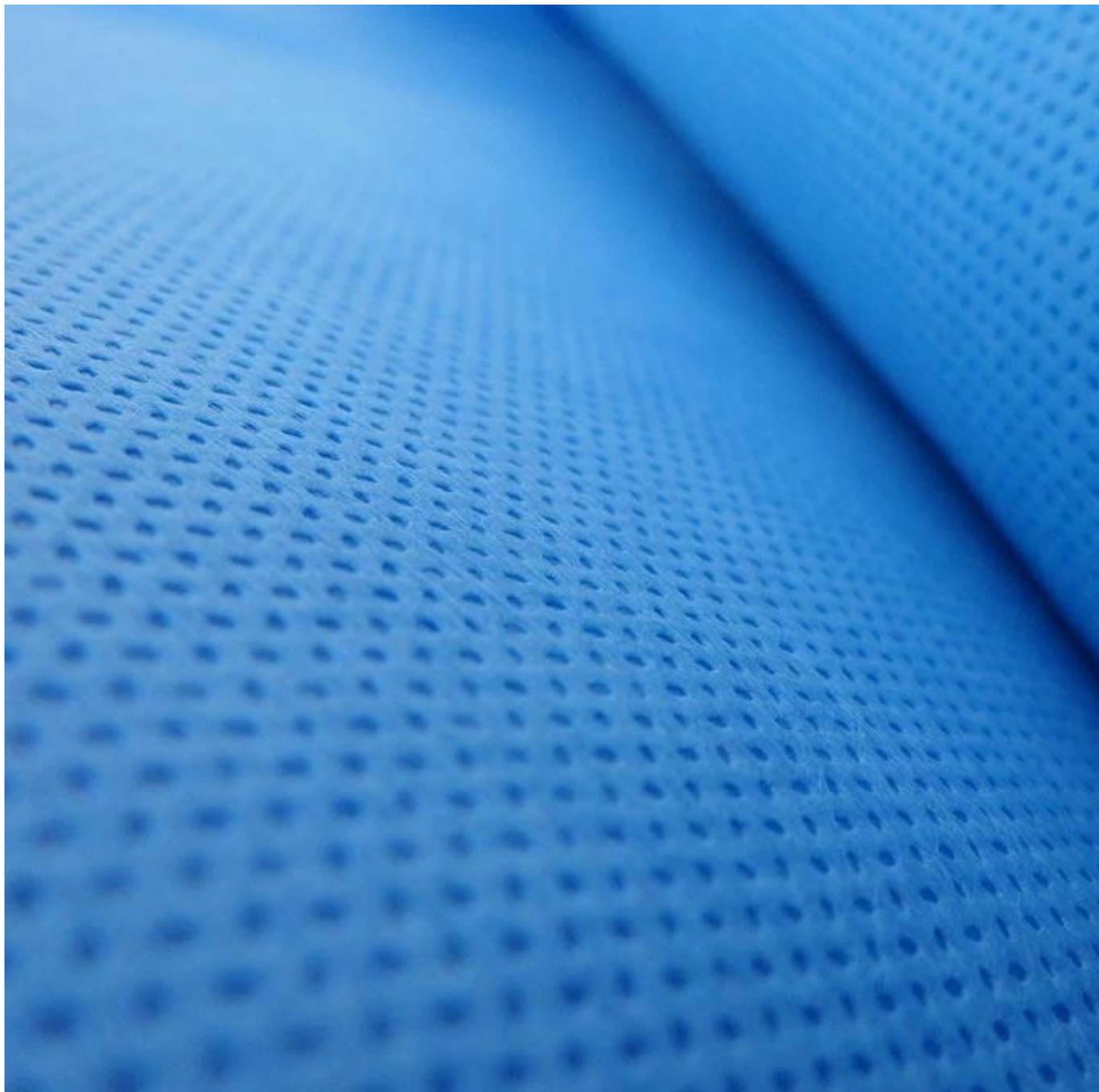


Aplicações de tecido não tecido Sms Smms Smmms

[fábrica de tecidos médicos smmms](#)



**Disposable Underwear**

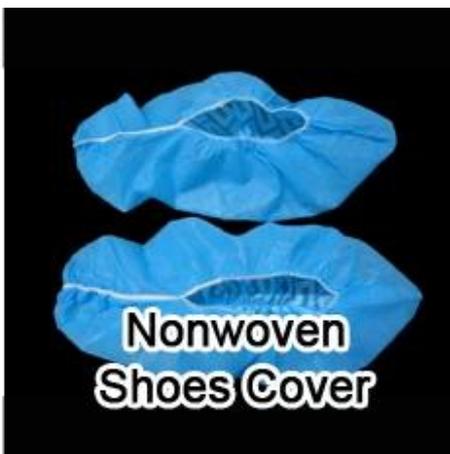

**Nonwoven Shoes Cover**



**Protective Clothing**



**Nonwoven Pillow bag**



**Nonwoven Bed Sheet**



**Face Mask**



**Medical Wrapping**



**Disposable Bouffant Cap**



**Nonwoven Sleeve**

Aplicações de batas cirúrgicas estéreis personalizadas de fábrica de tecidos médicos SMMMS tecido não tecido hospitalar de matéria-prima



Production Line



Product  
Packaging



Loading

Certificado of SMMMS Médico Fabrica de Batas Cirúrgicas Estéreis  
Personalizadas Matéria-Prima Tecido Não Tecido Hospitalar



<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 1 of 4	

**Applicant Information (客户信息)**

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缙纺织品有限公司)  
Applicant Address(委托单位地址) : No.8, Hezhong RD, Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247  
CHINA (佛山市南海区大沥镇盐步河中路8号)

**Sample Information (样品信息)**

Sample Description(样品描述) : SMS non-woven fabric 45g (SMS 无纺布 45 克)  
Style No.(款号) : KHSSMMS-45G  
Sample Quantity(样品数量) : 8 m (8 米)  
Color and Description(颜色及描述) : Medical blue: 45g (医用蓝色: 45 克)  
Size specification(号型规格) : KHSSMMS-45G

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-06-02
- Report date (报告日期) : 2020-06-05
- The original sample is stucked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

**Test Performed (检验标准)**

Judgement according to(评定依据):  
GB 19082-2009 Technical requirements for single-use protective clothing for medical use  
医用一次性防护服技术要求  
GB/T 38462-2020 Textiles-Nonwoven fabrics for isolation gowns Level II  
纺织品 隔离衣用非织造布 II 级  
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

**Pronounce (声明)**

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明, 测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行, 有注明除外。)  
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of  
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by  
(批准)

张志强





<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 2 of 4	

-- Test Result (测试结果) --

Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
√ GB 19082-2009		

**1. Tensile Strength(断裂强力) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)**

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <N>

Lengthwise(纵向)	104	≥ 45	Pass(合格)
Crosswise(横向)	51		

**2. Breaking Elongation(断裂伸长率) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)**

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <%>

Lengthwise(纵向)	94	≥ 15	Pass(合格)
Crosswise(横向)	78		

**3. Filtration Efficiency(过滤效率) GB 19082-2009 Section 5.7(条款 5.7)**

Air flow: 15L/min, Aerosol: NaCl(气体流量: 15L/min, 气溶胶颗粒: NaCl)

Unit(单位): <%>

Minimum value(最小值)	72.6	≥ 70	Pass(合格)
--------------------	------	------	----------

**4. Hydrostatic Pressure(抗渗水性) GB/T 4744-1997**

Distilled water temperature is 20°C. The rate of increase of water pressure is 6.0kPa/min.

Testing surface: face(测试水温度 20°C, 水压上升速率 6.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): <kPa>

Mean value(平均值)	6.93	≥ 1.67	Pass(合格)
-----------------	------	--------	----------

**5. Resistance to Penetration by Synthetic Blood(抗合成血液穿透性) GB 19082-2009 Appendix A(附录 A)**

Synthetic blood surface tension: 0.040N/m(合成血液表面张力: 0.040N/m)

Unit(单位): <grade(级)>

The sample cannot be pressurized due to air leakage, so it is not suitable for testing

(样品漏气无法加压, 不适合测试)





<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 3 of 4	
Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

**6. Water Vapor Permeability(透湿量) GB/T 12704-1991 Method A(方法 A)**

Desiccant method at 38°C, Relative humidity at 90%, wind speed at 0.3m/s, Testing surface: back.(吸湿法, 测试仓温度: 38°C, 湿度: 90%, 风速: 0.3m/s, 测试面: 反面)

Unit(单位): <g/(m<sup>2</sup>·d)>

Result(测试结果) 7.09x10<sup>3</sup> ≥ 2500 Pass(合格)

√ GB/T 38462-2020

**1. Hydrostatic Pressure(静水压) GB/T 24218.16-2017**


Distilled water temperature is 21°C. The rate of increase of water pressure is 1.0kPa/min.

Testing surface: face (测试水温度 21°C, 水压上升速率 1.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): <kPa>

Minimum value (最小值) 6.5 ≥ 1.8 Pass(合格)

Remark (备注): The hydrostatic pressure item is unauthorized for CNAS.  
(CNAS 未授权静水压项目。)

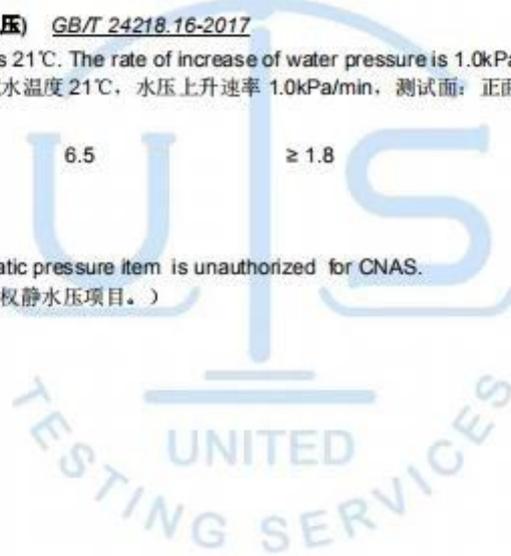



佛山中纺联检验技术服务有限公司  
 CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): <a href="http://www.fcl-sz.org.cn">www.fcl-sz.org.cn</a> 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 4 of 4	

Original (送检样品原样)



=====  
 ===== End of Report (检测报告结束) =====  
 =====



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼1, 3&4F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China  
 Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

Nossa empresa

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD. , que está localizado na cidade de Foshan. Estamos engajados na

fabricação e vendas de tecido não tecido e produtos não tecidos relacionados, desde 2005. Até agora, temos uma equipe profissional de vendas de elite, várias linhas de produção não tecidas avançadas com largura de 1,6 M, 1,9 M, 2,1 M, 2,4 M, 2.5M, 3.2M, 3.7M, 4.8M, etc. Nossos produtos são bem vendidos nos mercados interno e externo, amplamente utilizados nas áreas de agricultura e jardinagem, medicina e higiene, cuidados pessoais e beleza, aplicação industrial, embalagem e embalagem, fundação e construção, hotel e restaurante, proteção trabalhista e doméstica, decoração, etc. Os produtos de venda quente são tecido não tecido pp (polipropileno), tecido não tecido pet (poliéster), tecido não tecido sms , tecido não tecido elástico, material para embrulhar flores, roupa interior descartável, lençol descartável, tecido para controlo de ervas daninhas, toalha de mesa descartável, saco de proteção de frutas.



## Perguntas frequentes sobre batas cirúrgicas estéreis personalizadas de fábrica de tecidos SMMMS médicos Tecido não tecido hospitalar de matéria-prima

Pergunta	Resposta
Q1: você tem em estoque?	A1: Sim, temos.
Q2: Qual é o seu MOQ?	A2: Personalizado: 1ton
Q3: Como posso obter a amostra?	A3: se você precisar de amostra para testar, podemos fazer conforme sua solicitação. Mas precisamos cobrar taxas de amostra. Se for nosso produto regular em estoque, você apenas paga o custo do frete e a amostra é gratuita.
Q4: Qual é o detalhe do seu pacote?	A4: embalado individualmente para cada peça ou requisitos do cliente
Q5: O que devo fazer se não conseguir encontrar o que procuro no seu site?	R5: Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco por e-mail e enviar informações detalhadas sobre o produto que você procura. Verificaremos se está disponível.

Q6: E quanto ao prazo de entrega para produção em massa?	A6: Honestamente, depende da quantidade do pedido e da estação em que você faz o pedido. De um modo geral, o prazo de entrega é de cerca de 2-4 semanas. Portanto, sugerimos que você inicie a consulta o mais cedo possível.
P7: tudo bem fazer a própria marca do cliente?	A7: Claro. Damos boas-vindas aos clientes OEM. Podemos discutir o pacote, design, etc.
P8: quando posso obter o preço?	A8: geralmente citamos dentro de 24 horas após recebermos seus detalhes de consulta. Se você é muito urgente para obter o preço, ligue para nós ou informe-nos em seu e-mail para que possamos cotar o preço o mais rápido possível.