

## Steril Tek Kullanımlık SMS Nonwoven Cerrahi Önlük Ürün Açıklaması

Bizimki, normal SMS'den daha kaliteli olan SSMMS'dir. SSMMS, SMS'den daha iyi düzgünlük, daha iyi gerilme mukavemeti, daha iyi izolasyon yeteneği olacaktır. ama aslında siz ve çoğu kullanıcı için SMS ve SSMMS'yi sizin gözünüzle ayırt edemezsiniz. çünkü aynı görünüyorlar.

Normalde, 45gsm SSMMS'imiz en çok cerrahi önlük ve örtü yapımında kullanılır.

45 gsm ürünümüz ABD standardı AAMI seviye 3'ü ve Avrupa standardı EN 13795-1: 2019'u geçebilir Cerrahi giysiler ve örtüler - Gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 1: Cerrahi örtüler ve önlükler AAMI ve EN 13795 raporları mevcut olacaktır.

şimdi bu SSMMS kumaşını Türkiye, ABD, İtalya, Peru, Azerjajjan, Kolombiya, Rusya, Birleşik Krallık'a sunuyoruz.

**Ürün:** Steril Tek Kullanımlık SMS Nonwoven Cerrahi Önlük

**Model numarası. :** GT-hy sms 45b

**Kompozisyon :** pp

**Teknik:** spunbond + spunbond + meltblown + meltblown + bükülmüş

**Ortalama kumaş ağırlığı:** 45 GSM

**Boyut :** 160 santimetre

**Uzunluk:** 1000 m

**Her Rulonun Çapı:** 55 santimetre

**Ağırlık :** yaklaşık 73 kg

**Ses :** yaklaşık 0,48 m<sup>3</sup>

**Renkler :** Mavi

**Standart:** ABD standardı AAMI seviye 3 ve Avrupa standardı EN 13795-1: 2019 Cerrahi giysiler ve örtüler - Gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 1: Cerrahi örtüler ve önlükler

**Adedi:** 1000 KG (özelleştirilmiş)

**Paket:** Rulo halinde paketlenmiş, 2 "veya 3" iç ID dolgulu, dışta poli çantalar

**Örnekleme :** Navlun toplama ile ücretsiz numune

**Karakteristik:** anti-bakteri, anti-çekme, anti-statik, yırtılmaya karşı dayanıklı, nefes alabilen, çevre dostu, su geçirmez

**Uygulamalar:** ameliyat önlükleri, tiyatro önlükleri, ameliyat örtüleri

our SSMMS products can reach the following standards of the surgical gown

我们的SSMMS产品能达到的以下手术衣标准

	Standard Test Items 标准测试项目	AAMI PB70 美标	EU 13795 欧标	YY/T 0506 国标
Protection Performance 防护性能	Hydrostatic Pressure Test 静水压测试	√	√	√
	Liquid Permeability 液体渗透性	√	√	√
	Blood Permeability 血液渗透性	√#	○	○
	Microbial Permeability 微生物渗透性	√#	√	√
Material Strength 材料强度	Tensile Strength 拉力强度	○	√	√
	Blasting Strength 爆破强度	○	√	√
The Comfort Level 舒适度	Breathability 透气性	○	○	○
	Moisture Permeability 透湿性	○		○
Microbial Transmission Performance 微生物传递性能	Deflocculation 脱絮	○	√	√
	Particle Cleanliness 颗粒洁净度	○	√	√
	Microbial Cleanliness 微生物洁净度	○	√	√

√: Test items included in the standard;

√: 标准中包含该测试项目;

#: Only applicable to Level 4 protection products;

#: 仅适用于四级防护产品;

○: Test items are not included in the standard

○: 标准中不包含改测试项目

美国医疗仪器促进协会 (AAMI) 对于医用纺织产品如：手术衣、洞巾、隔离衣等液态阻隔性能等级分为四级  
 American Association for the Advancement of Medical Devices (AAMI) divides the liquid barrier performance into four levels for the medical textile products, such as surgical gown, drape and isolation clothing, etc.



第四级 (Level 4)  
 必须通过血液与病毒渗透两项试验, 抗静水压试验必须大于140cmH<sub>2</sub>O;  
 Must pass the test of Blood and virus penetration, hydrostatic pressure test must be more than 140cmH<sub>2</sub>O;

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
ASTM F1671: 2003*	PASS	4%
ASTM F1670: 2003*	PASS	4%

高防护



第三级 (Level 3)  
 疏水性渗透量必须小于1.0g, 抗静水压试验必须大于50cmH<sub>2</sub>O;  
 The hydrophobic permeability must be less than 1.0g, hydrostatic pressure test must be more than 50 cmH<sub>2</sub>O

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<1.0g	4%
AATCC 127:1998	>50cm	4%

加强防护



第二级 (Level 2)  
 疏水性渗透量必须小于1.0g, 抗静水压试验必须大于20cmH<sub>2</sub>O;  
 The hydrophobic permeability must be less than 1.0g, hydrostatic pressure test must be more than 20cmH<sub>2</sub>O

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<1.0g	4%
AATCC 127:1998	>20cm	4%

标准防护




第一级 (Level 1)  
 医用纺织品必须经过疏水性 (抗冲击渗透) 试验, 渗透量必须小于4.5g  
 Medical textiles must pass the hydrophobicity (impact penetration resistance) test, and the penetration amount must be less than 4.5g

测试标准 Test	测试结果 Results	测试要求 AQL Requirements
AATCC 42:2000	<4.5g	4%

标准防护



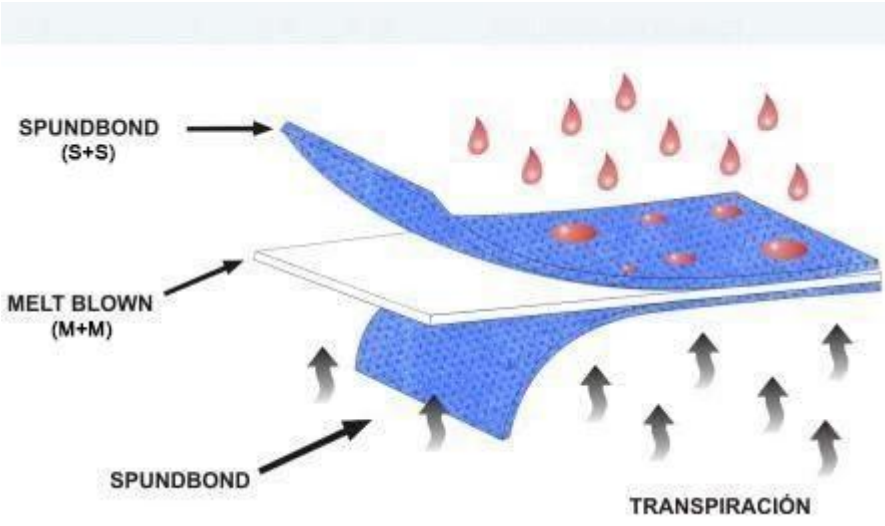


## Steril Tek Kullanımlık SMS Nonwoven Cerrahi Önlük Ürün Gösterisi

[SMS Tıbbi Dokumasız Tedarikçi](#)







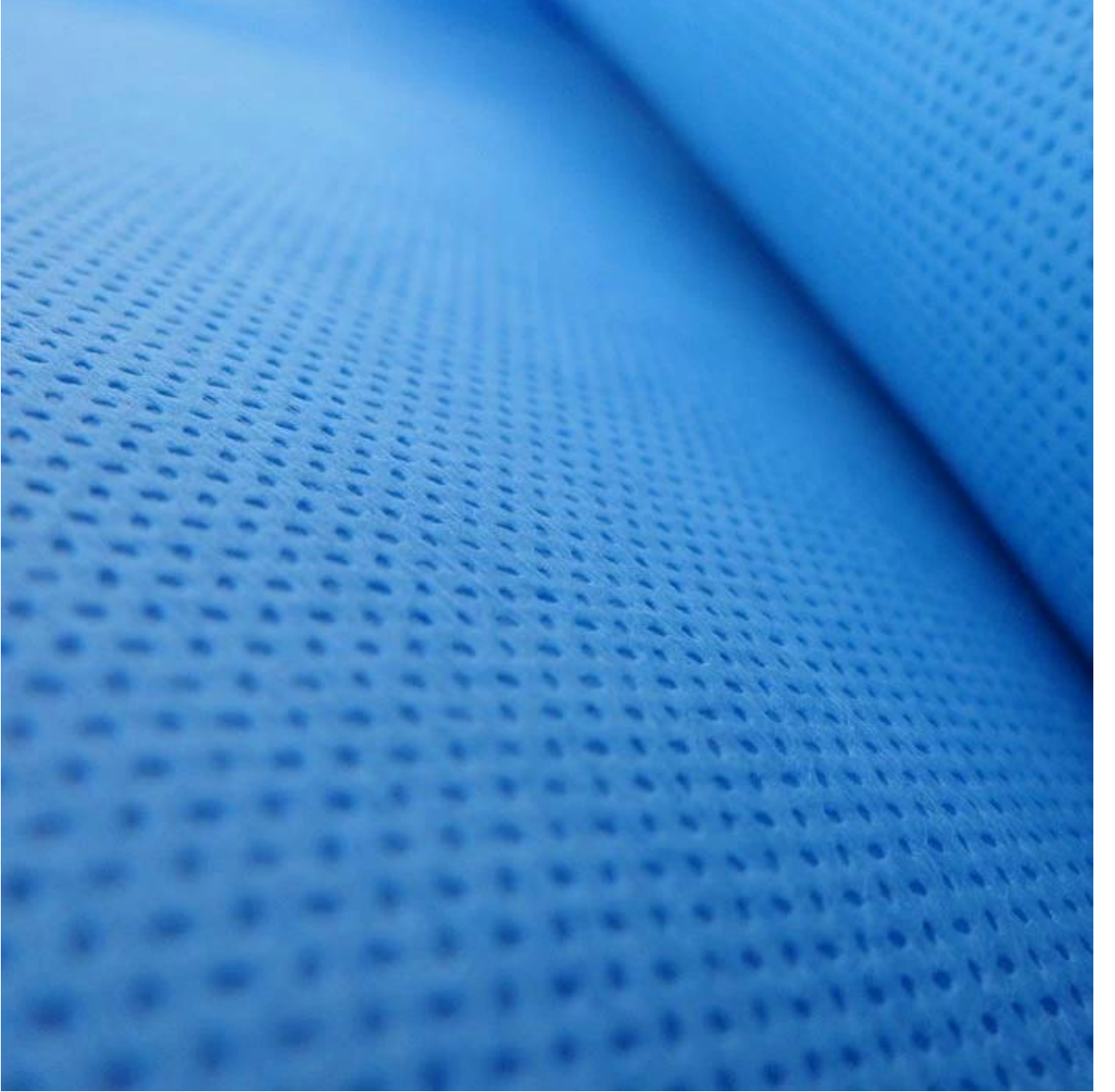

## Steril Tek Kullanımlık SMS Nonwoven Cerrahi Önlük Uygulamaları

[Non-Woven SMS Kumaş Satışta](#)





**Disposable Underwear**



**Nonwoven Shoes Cover**



**Protective Clothing**




**Nonwoven Pillow bag**



**Nonwoven Bed Sheet**



**Face Mask**

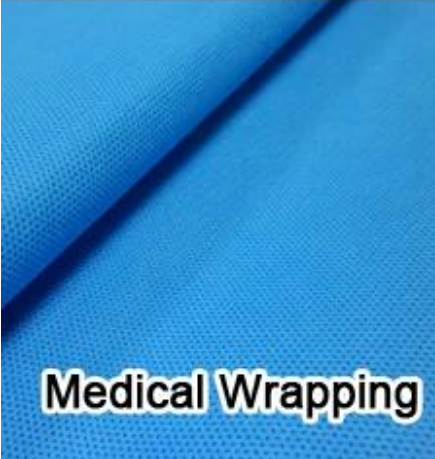

**Medical Wrapping**



**Disposable Bouffant Cap**



**Nonwoven Sleeve**

Steril Tek Kullanımlık SMS Nonwoven Cerrahi Önlük Ürün Paketleme ve Nakliye





Production Line



Product Packaging



Loading

SSMMS Nonwoven Fabric Sertifikasi



<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 1 of 4	

**Applicant Information (客户信息)**

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缙纺织品有限公司)  
Applicant Address(委托单位地址) : No.8, Hezhong RD, Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247  
CHINA (佛山市南海区大沥镇盐步河中路8号)

**Sample Information (样品信息)**

Sample Description(样品描述) : SMS non-woven fabric 45g (SMS 无纺布 45 克)  
Style No.(款号) : KHSSMMS-45G  
Sample Quantity(样品数量) : 8 m (8 米)  
Color and Description(颜色及描述) : Medical blue: 45g (医用蓝色: 45 克)  
Size specification(号型规格) : KHSSMMS-45G

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-06-02  
- Report date (报告日期) : 2020-06-05  
- The original sample is stucked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

**Test Performed (检验标准)**

Judgement according to(评定依据):  
GB 19082-2009 Technical requirements for single-use protective clothing for medical use  
医用一次性防护服技术要求  
GB/T 38462-2020 Textiles-Nonwoven fabrics for isolation gowns Level II  
纺织品 隔离衣用非织造布 II 级  
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

**Pronounce (声明)**

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明, 测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行, 有注明除外。)  
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of  
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by  
(批准)

张志强







<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 2 of 4	

-- Test Result (测试结果) --

Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
√ GB 19082-2009		

**1. Tensile Strength(断裂强力) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)**

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <N>

Lengthwise(纵向)	104	≥ 45	Pass(合格)
Crosswise(横向)	51		

**2. Breaking Elongation(断裂伸长率) GB/T 3923.1-1997 Strip test(条样法)**

5cm strip test, CRE tensile test machine, testing speed 100mm/min, gauge length 100mm.(5 厘米条样法, CRE 拉伸测试仪, 测试速度 100mm/min, 初始隔距 100mm)

Unit(单位): <%>

Lengthwise(纵向)	94	≥ 15	Pass(合格)
Crosswise(横向)	78		

**3. Filtration Efficiency(过滤效率) GB 19082-2009 Section 5.7(条款 5.7)**

Air flow: 15L/min, Aerosol: NaCl(气体流量: 15L/min, 气溶胶颗粒: NaCl)

Unit(单位): <%>

Minimum value(最小值)	72.6	≥ 70	Pass(合格)
--------------------	------	------	----------

**4. Hydrostatic Pressure(抗渗水性) GB/T 4744-1997**

Distilled water temperature is 20°C. The rate of increase of water pressure is 6.0kPa/min.

Testing surface: face(测试水温度 20°C, 水压上升速率 6.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): <kPa>

Mean value(平均值)	6.93	≥ 1.67	Pass(合格)
-----------------	------	--------	----------

**5. Resistance to Penetration by Synthetic Blood(抗合成血液穿透性) GB 19082-2009 Appendix A(附录 A)**

Synthetic blood surface tension: 0.040N/m(合成血液表面张力: 0.040N/m)

Unit(单位): <grade(级)>

The sample cannot be pressurized due to air leakage, so it is not suitable for testing

(样品漏气无法加压, 不适合测试)







<b>检测报告(Testing Report)</b>	防伪查询网址(Security website): <a href="http://www.fcl-sz.org.cn">www.fcl-sz.org.cn</a> 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 3 of 4	
Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

**6. Water Vapor Permeability(透湿量) GB/T 12704-1991 Method A(方法 A)**

Desiccant method at 38°C, Relative humidity at 90%, wind speed at 0.3m/s, Testing surface: back.(吸湿法, 测试仓温度: 38°C, 湿度: 90%, 风速: 0.3m/s, 测试面: 反面)

Unit(单位): <g/(m<sup>2</sup>·d)>

Result(测试结果) 7.09x10<sup>3</sup> ≥ 2500 Pass(合格)

√ GB/T 38462-2020

**1. Hydrostatic Pressure(静水压) GB/T 24218.16-2017**

Distilled water temperature is 21°C. The rate of increase of water pressure is 1.0kPa/min.

Testing surface: face (测试水温度 21°C, 水压上升速率 1.0kPa/min, 测试面: 正面)

Unit(单位): <kPa>

Minimum value (最小值) 6.5 ≥ 1.8 Pass(合格)

Remark (备注): The hydrostatic pressure item is unauthorized for CNAS.  
(CNAS 未授权静水压项目。)





佛山中纺联检验技术服务有限公司  
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

检测报告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website): www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code): 0561010345	
报告编号(Report No): ZFLJ2626978	Page 4 of 4	

Original (送检样品原样)



=====  
End of Report (检测报告结束)  
=====



广东省佛山市南海区西樵镇南方技术创新中心一、三、四楼1, 3&4F., Nanfang Technology Innovation Center, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China  
Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 Http://www.fcl.org.cn

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

Şirketimiz

**FOSHAN GUIDE TEKSTİL CO., LTD.** Foshan şehrinde bulunan. 2005 yılından beri nonwoven kumaş ve nonwoven ile ilgili ürünlerin üretimi ve satışı yapıyoruz. Şimdiye kadar profesyonel elit satış ekibimiz, 1.6M,

1.9M, 2.1M, 2.4 genişliğinde birkaç gelişmiş nonwoven üretim hattımız var. M, 2.5M, 3.2M, 3.7M, 4.8M, vb. Ürünlerimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda satılmaktadır, tarım ve bahçecilik, tıbbi ve hijyen, kişisel bakım ve güzellik, endüstri uygulamaları, paketleme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. ve sarma, temel ve bina, otel ve restoran, işgücü koruma ve ev, dekorasyon vb. Sıcak satış ürünleri pp (polipropilen) nonwoven kumaş, pet (polyester) nonwoven kumaş, sms dokuma olmayan kumaş, elastik dokuma olmayan kumaş, çiçek sarma malzemesi, tek kullanımlık iç çamaşırı, tek kullanımlık çarşaf, ot kontrol kumaşı, tek kullanımlık masa örtüsü, meyve koruma çantası.



## Steril Tek Kullanımlık SMS Nonwoven Cerrahi Önlük SSS

Soru	Cevap
S1: Stokta var mı?	A1: Evet, sahibiz.
S2: MOQ'unuz nedir?	A2: Özelleştirilmiş: 1ton
S3: Örneği nasıl alabilirim?	A3: Test etmek için numuneye ihtiyacınız varsa, isteğinize göre yapabiliriz. Ancak numune ücreti almamız gerekiyor. Stoktaki normal ürünümüzse, sadece navlun bedelini ödersiniz ve numune ücretsizdir.
S4: Paket detayınız nedir?	A4: her parça veya müşterinin gereksinimleri için ayrı ayrı paketlenmiştir
S5: Web sitenizde aradığımı bulamazsam ne yapmalıyım?	A5: Lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmekten ve aradığınız ürün için detaylı bilgi göndermekten çekinmeyin. Bulunup bulunmadığımı kontrol edeceğiz.
S6: Seri üretim için kurşun zamanı ne durumda?	A6: Dürüst olmak gerekirse, sipariş miktarına ve sipariş ettiğiniz mevsime bağlıdır. Genel olarak, teslim süresi yaklaşık 2-4 haftadır. Bu nedenle, sorgulamaya olabildiğince erken başlamanızı öneririz.
S7: Müşterinin kendi markasını yapmak doğru mudur?	A7: Elbette. OEM müşterilerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Paketi, tasarımı vb. Tartışabiliriz.
S8: Fiyatı ne zaman alabilirim?	A8: Genellikle, soruşturma detayınızı aldıktan sonra 24 saat içinde teklif veririz. Fiyatı almak için çok acil iseniz, lütfen bizi arayın veya e-postanızda belirtin, böylece fiyatınızı mümkün olan en kısa sürede teklif edeceğiz.